



数量限定 注目商品のご案内

ヒノキ



●花粉に毎年お悩みのかたへ●

「自宅で手軽にセルフケア」



ドクターレッド事業部

鼻ヘルパー™ II

鼻腔に赤色光・近赤外線を効率よく照射します

※新しい鼻ヘルパーIIは現行の鼻ヘルパーと同等な効果や使い方が、電池交換は不要なので、とても便利です。

安全・簡単・痛くない!!

- 近赤外線と赤色光を鼻孔内に照射
- 1回3分、1日2回。使用後は自動オフ
- 眠気などの副作用はございません
- お鼻に入れてスイッチを入れるだけ
- 持ち運びが簡単、気軽に持ち出せる
- お薬との併用も可能

ヨモギ



ブタクサ



花粉、ほこり、ダニなどの異物が鼻に入ると、不快感を引き起こす物質が放出されます。特定の波長である赤色光/近赤外線を鼻粘膜に照射することで、反応を起こす物質が抑えられ、不快感の低下につながります。この原理を用いた「鼻ヘルパーII」は毎日のお鼻ケアにお勧めです。



国際医療福祉大学教授
中川 雅文 氏

商品名：鼻ヘルパーII

商品番号：KK-900 **6,980円(税別)**

内容品：プロテックカバー付本体、充電用USBケーブル1本
交換用プロテックカバー1ペア、取扱説明書

電源：DC3.7V/260mAh (リチウムイオン電池)

照射光：赤色光660nm (+/-5nm)

近赤外線940nm (+/-5nm)

出力：2.33mW/Cm²~13.1mW/cm²

本体サイズ：65×43×16mm 本体重量：20g (電池含む)

電池：最大300サイクルの充電

充電1サイクルで約90回使用 (45日間)

製造：中国 保証期間：1年間

イネ科



1.




On/Off ボタン

「On/Off」ボタンを1秒間押してください。
2つの波長がアクティブになり、プローブ先端が赤く点灯します。



2.

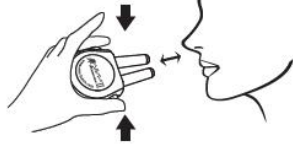

両脇にある「調整用ボタン」を押しながら、
プローブ先端を広げて鼻孔にプローブを
挿入します。

3.



電源は3分後に自動的に切れます。

3分間1日2回

1回の充電で
45日間使えます

薬と一緒に
使用できます

カナムグラ



株式会社 **カナケン**

- 本社 横浜 TEL 045-901-5471 FAX 045-902-9262
- 大阪営業所 TEL 06-6935-3016 FAX 06-6935-3017
- 新潟営業所 TEL 025-286-0521 FAX 025-286-8870
- 福島営業所 TEL 024-961-7211 FAX 024-961-7221
- 仙台出張所 TEL 022-287-6273 FAX 022-287-6218